

Gangi-HydroGuard[®]

Gangiハイドロガード

Coaxial Needle

～組織損傷リスク軽減への提案～




Gangi-HydroGuard®

Gangiハイドロガード

Coaxial Needle

ルアーハブ (スプリングバック)

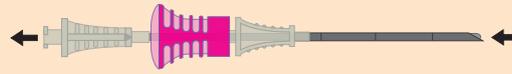

- ルアーハブの戻りと同時にプラントチップスタイレット先端も戻ります
- 視覚的・感覚的にプラントチップスタイレット先端の動きがわかります
- ルアーハブの押し込みでプラントチップスタイレット先端を操作できます

ベベルインジケータ

- ベベルの向きが確認できます

スプリング内蔵プラントチップ

- プラントチップスタイレットを抜去せずにコアキシャルニードルを進めることが可能

サイドホール

- プラントチップスタイレットを抜去せずにルアーハブから薬液の注入が可能

プラントチップ

- ルアーハブを押さえることで、プラントチップスタイレット先端が露出し、脈管・臓器損傷の抑制が可能

コアキシャルニードル


- エコー対応
- 深度マーカ表示

トロッカースタイレット

販売名：Gangiハイドロガード 承認番号：30200BZX00081000

型番	仕様		対応する生検針	販売単位
HG15-121	15G	12.1cm	16G	5本/箱
HG15-171		17.1cm		
HG17-121	17G	12.1cm	18G	
HG17-171		17.1cm		

*事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しくご使用ください。
*再滅菌・再使用はしないでください。
*製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。
*本製品に関するお問い合わせは、販売店もしくはシーマン株式会社までご連絡ください。

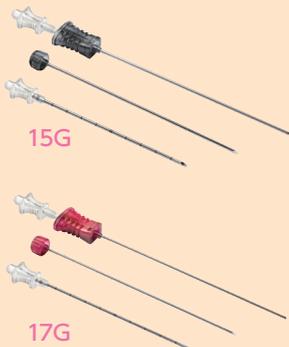

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
https://www.sheen-man.co.jp
本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL (06)6354-7702 FAX (06)6354-7114
東京支店 TEL (03)5207-3521 FAX (03)5207-3522
九州支店 TEL (092)283-7400 FAX (092)283-7401
名古屋支店 TEL (052)218-7337 FAX (052)218-7338

製造販売元

スーガン株式会社
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
第一種医療機器製造販売業