




Sheen-man Bone Marrow series

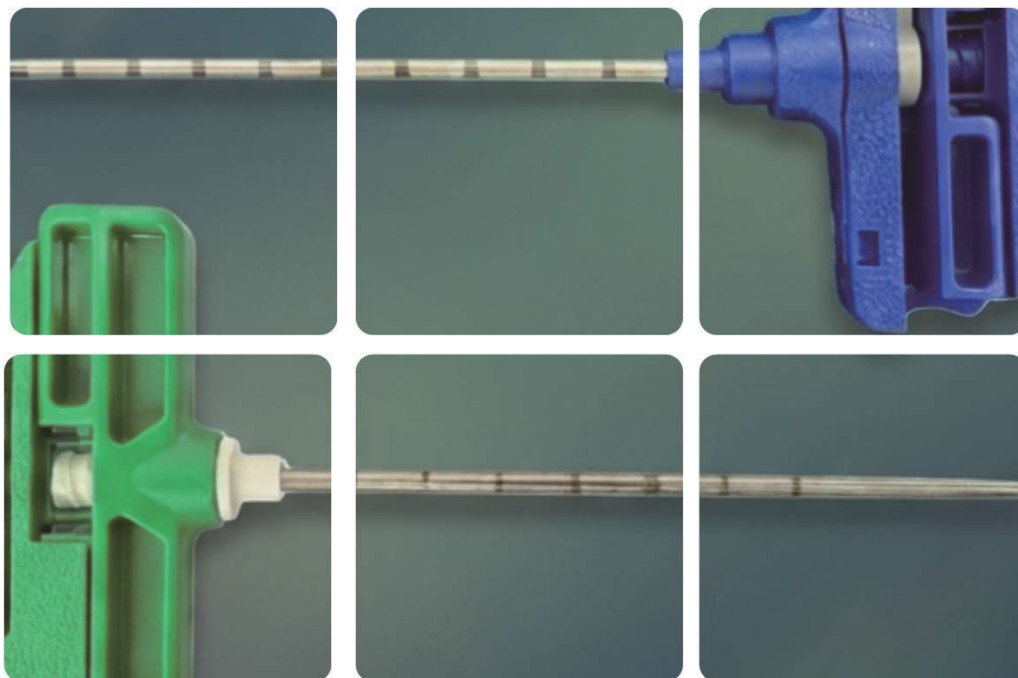

Bone Marrow Biopsy & Aspiration Needles


RF Bone Marrow Needle




力を加えやすい、人間工学に基づいて設計されたハンドル

カニューレ スタイルット


スタイルット先端はエクストラシャープチップ
カニューレ先端は組織のコアリング性を向上するファイブグライドタイプ（5面カット）

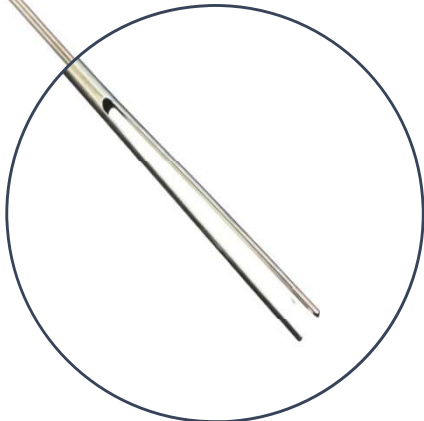

トラップカニューレで組織の捕捉、保持が可能

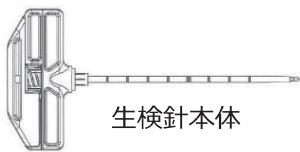

生検針本体

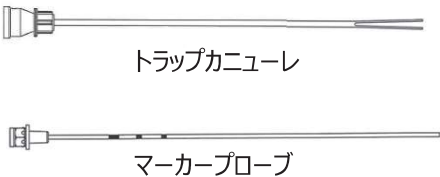

トラップカニューレ

マーカープローブ



ニードルバイス



プローブガイド

型番	スペック	ゲージ	トラップカニューレ	ニードルバイス	長さ
RTN-84-T		8G	○	○	100mm(4inch)
RTN-114-T		11G	○	○	100mm(4inch)
RTN-116-T		11G	○	×	150mm(6inch)

販売名：RFボーンマロウニードル
認証番号：305ADBZX00068000
製造販売元：スーガン株式会社

* 事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しく使用ください。
* 再滅菌・再使用はしないでください。
* 製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。


ディスポーザブル骨髓生検針

SNARECOIL™
BONE MARROW BIOPSY NEEDLE




スネアコイルレバー
レバーを操作することで、カニューレ内部のスネアコイルが
回転し、組織を把持

内蔵されたスネアコイルで組織を把持し、トラップカニューレへの入れ替えが不要
※スタイレットが挿入された状態でスネアコイルレバーを操作しないでください

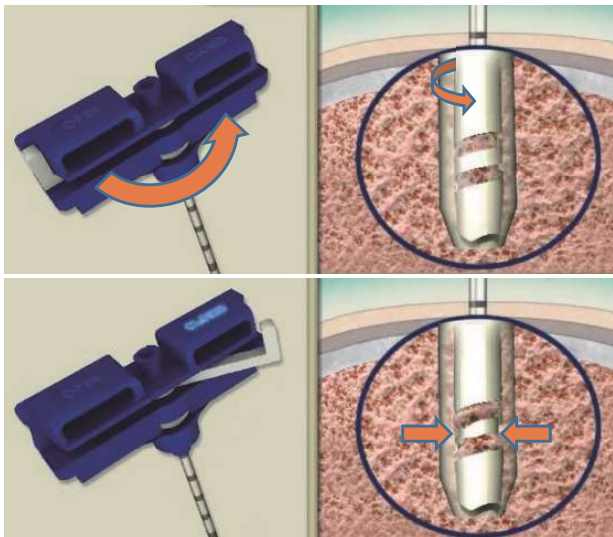

スタイレット先端はエクストラシャープチップ（13Gはトロッカーチップ）
カニューレ先端は組織のコアリング性を向上するファイブグライドタイプ（5面カット）

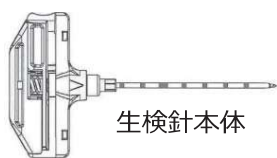

生検針本体



マーカープローブ



ニードルバイス



プローブガイド

型番	スペック	ゲージ	長さ
RBN-114SS		11G	100mm(4inch)
RBN-133		13G	74.5mm(3inch)

販売名：RFボーンマロウニードル
認証番号：305ADBZX00068000
製造販売元：スーガン株式会社

* 事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しく使用ください。
* 再滅菌・再使用はしないでください。
* 製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

Bone Marrow Harvest & Aspiration Needles

RF Bone Marrow Needle ディスポーザブル骨髓移植針



- ・ディスポーザブル
滅菌・研磨不要、シャープな切れ味
- ・ルアーロックポート
ルアーロックシリンジ装着可能
- ・人間工学に基づいたハンドル設計
穿刺時に力を加えやすく、疲れにくいハンドル

型番	スペック	ゲージ	針先端形状	深度マーカー	長さ
RAN-132-BEV		13G	ベベルチップ	○	50.8mm(2inch)
RAN-133-BEV		13G	ベベルチップ	○	76.2mm(3inch)
RAN-1528		15G	トロッカーチップ	×	71.1mm(2.8inch)

販売名：RFボーンマロウニードル
認証番号：305ADBZX00068000
製造販売元：スーガン株式会社


* 事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しくご使用ください。
* 再滅菌・再使用はしないでください。
* 製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

Sheen Man Bone Marrow Aspiration needle ディスポーザブル骨髓穿刺針


・腸骨・胸骨兼用

幅広く針長を調節可能

- ①ニードルアジャスタ装着時：針長【7mm~30mm】
- ②ニードルアジャスタ可動部(A)を外した場合：針長【35mm】
- ③ニードルアジャスタ基部(B)を外した場合：針長【60mm】

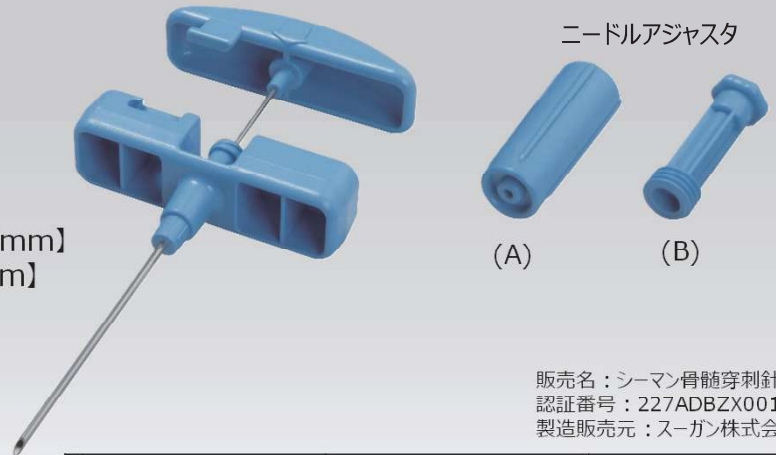

販売名：シーマン骨髓穿刺針
認証番号：227ADBZX00158000
製造販売元：スーガン株式会社

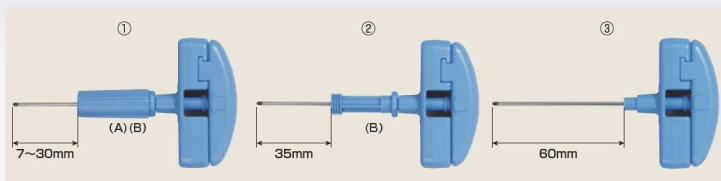

型番	スペック	ゲージ	長さ
SBMA1560		15G	60mm
SBMA1660		16G	60mm

* 事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って、正しくご使用ください。
* 再滅菌・再使用はしないでください。
* 製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

発売元

信頼をかたちに
シーマン株式会社
https://www.sheen-man.co.jp
本社 大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
TEL (06) 6354-7702 FAX (06) 6354-7114
東京支店 TEL (03) 5207-3521 FAX (03) 5207-3522
九州支店 TEL (092) 283-7400 FAX (092) 283-7401
名古屋支店 TEL (052) 218-7337 FAX (052) 218-7338

製造販売元

スーガン株式会社
大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044
第一種医療機器製造販売業

KN.26.08.1000.70.複合-B